


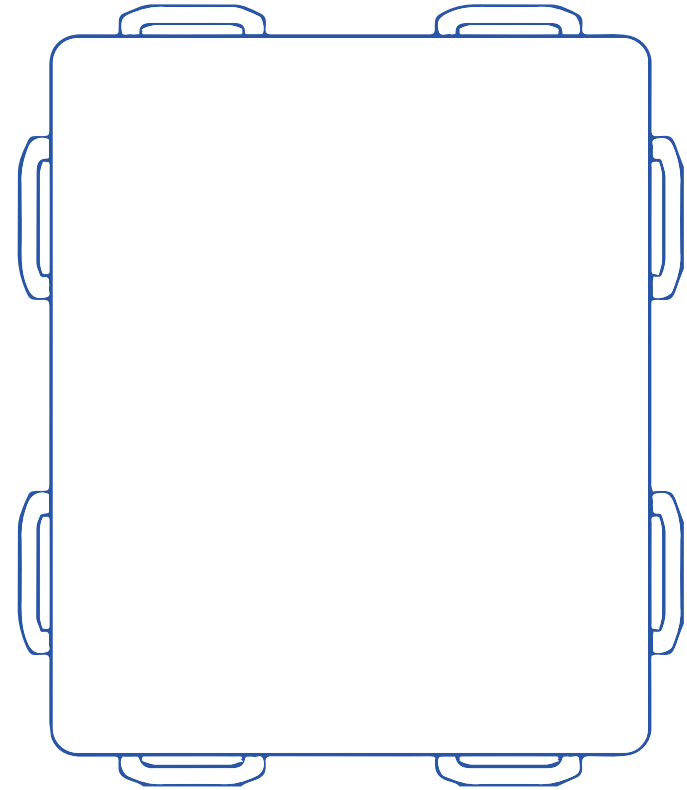

Positionierungsunterlage für den Patiententransfer

Benutzerhandbuch

support@eyra.group

● **SPEZIFIKATIONEN:**


-Stoff: Nylon

-Abmessungen: 122cm x 102cm

-Gewicht: 0,710 kg

● **PFLEGEHINWEISE:**

Maschinenwäsche kalt. Lufttrocknen. Nicht im Trockner trocknen oder längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. KEINE Weichspüler oder Bleichmittel verwenden.

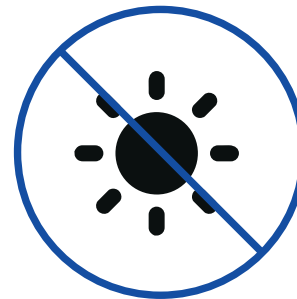


● EINFÜHRUNG:

Die Eyra Lagerungshilfe mit Griffen wurde speziell entwickelt, um bettlägerige Patienten beim Anheben, Umsetzen, Wenden und Lagerung zu unterstützen. Mit der Lagerungshilfe wird die Pflege von Patienten erleichtert und unnötige Rücken- oder Lendenwirbelerkrankungen können vermieden werden.

● NOTIZ:

1. Helfen Sie dem Patienten, sich in die Mitte der Lagerungshilfe zu legen, wobei die Schulter/das Schulterblatt mit dem obersten Band ausgerichtet sein sollte, um ein Abknicken des Körpers beim Drehen zu vermeiden.

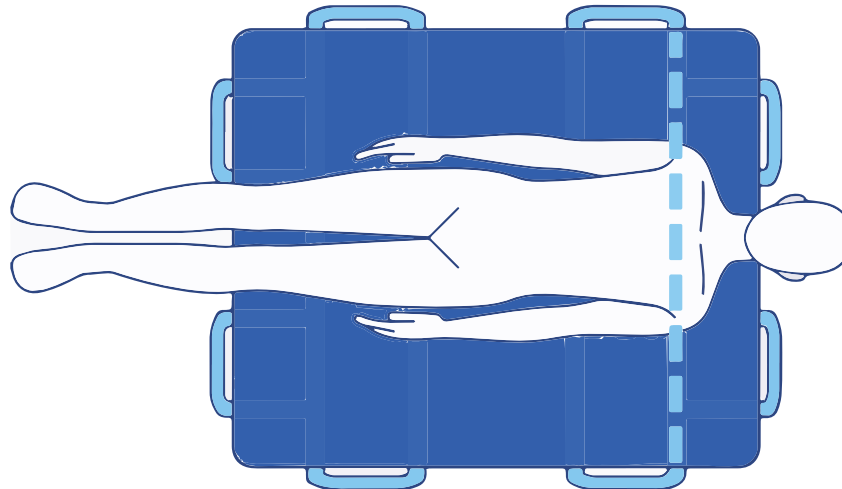


2. Beim Anheben des Oberkörpers des Patienten gehen Sie bitte vorsichtig und langsam vor, um Beschwerden im Nackenbereich zu vermeiden.

● ANWENDUNG:


Schritt 1.

Helfen Sie dem Patienten, sich auf die Seite zu legen.

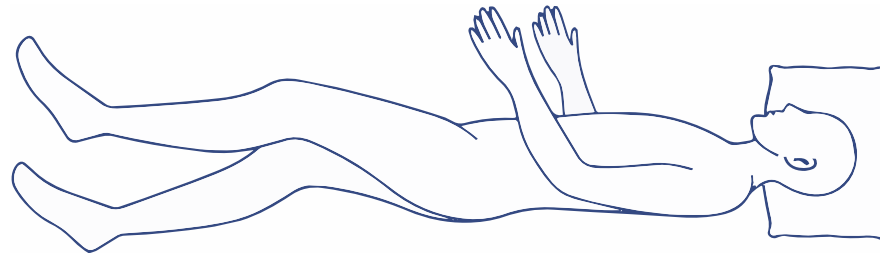



Schritt 2.

Öffnen Sie die Lagerungshilfe, rollen Sie sie etwa zu $\frac{2}{3}$ auf und legen Sie sie vorsichtig unter den Patienten.

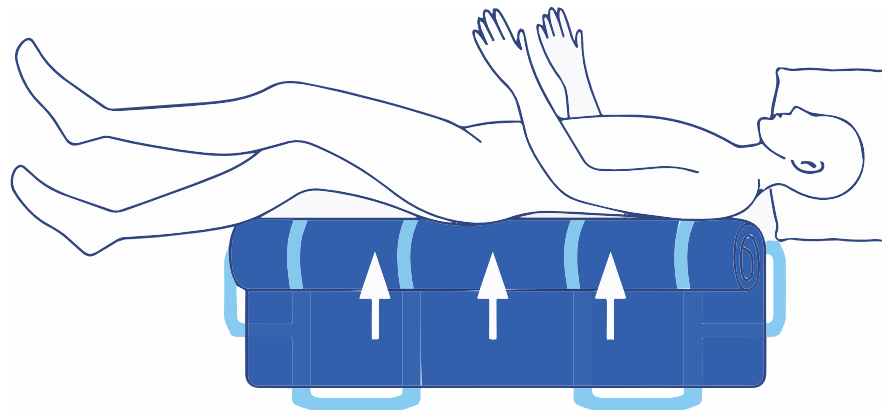


Schritt 3.

Helfen Sie dem Patienten, sich auf die andere Seite zu drehen, und ziehen Sie den aufgerollten Teil langsam heraus.

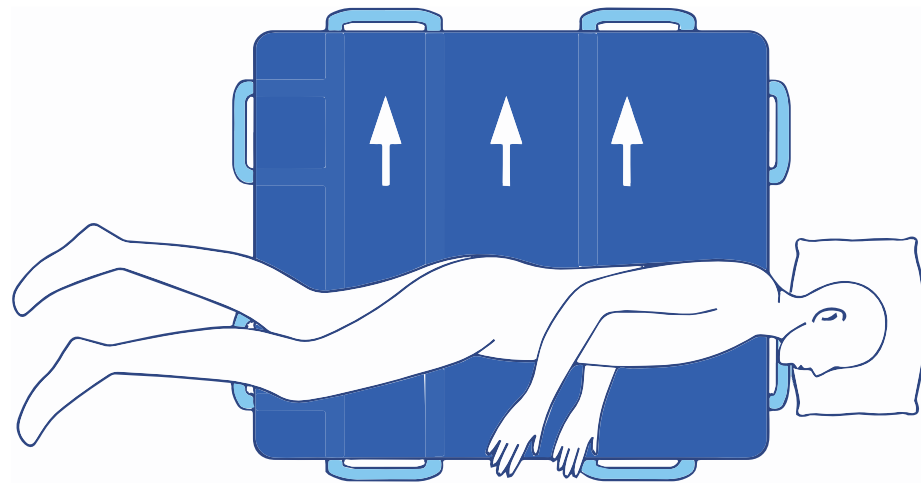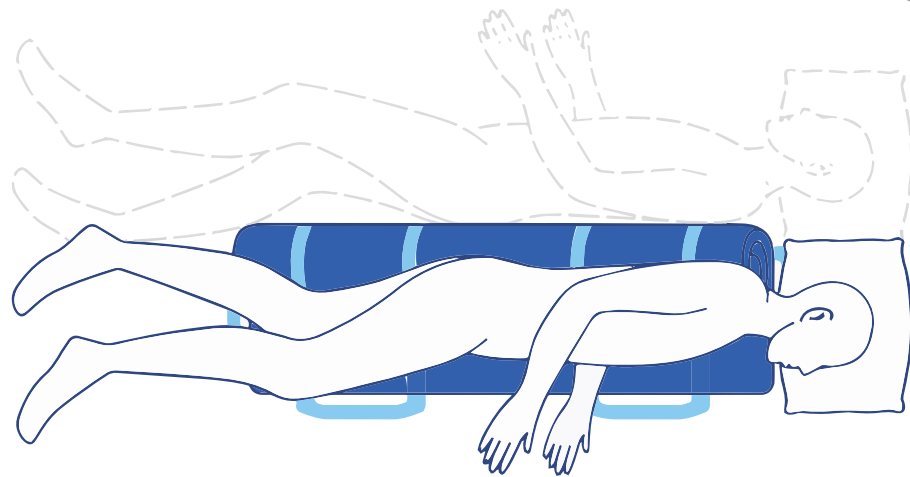


● ANWENDUNGSMETHODEN:

1. Um den Patienten vollständig anzuheben und neu zu positionieren, sind zwei Personen erforderlich, die zusammenarbeiten und die seitlichen Griffe anheben.

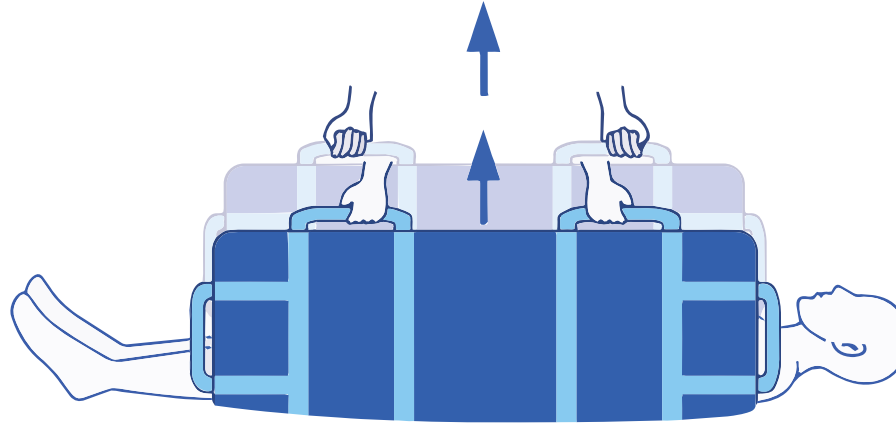

2. Um den Oberkörper des Patienten anzuheben und in einer sitzenden Position zu halten,

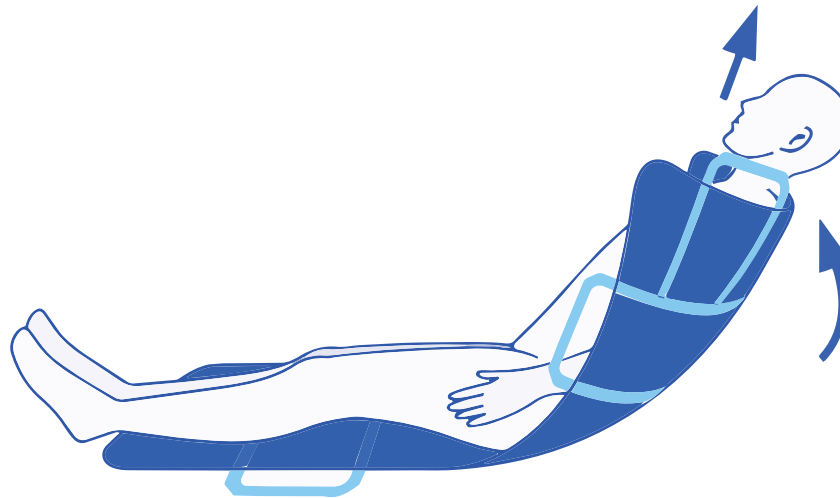

● SICHERHEITSHINWEISE:

1. Dieser Artikel ist nicht 100% wasserdicht (Flüssigkeit kann durch die Nähte des Gurtes dringen). Bei Auftreten von Harninkontinenz bitte so schnell wie möglich reinigen, um ein Durchnässen des Bettlakens zu vermeiden.

2. Die Lagerungshilfe ist weich und sollte auf einer ebenen Bettfläche verwendet werden. Wenn Sie ein verstellbares Bett anheben, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen, die Lagerungshilfe zuerst zu entfernen, um ein Verrutschen zu verhindern.