


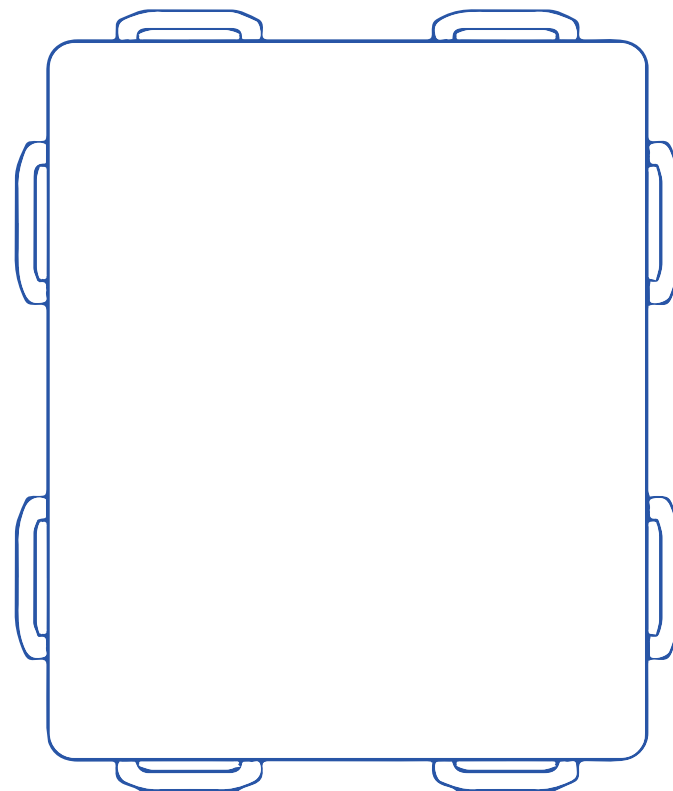

Almohadilla de cama de posicionamiento

Guia del usuario

support@eyra.group

● ESPECIFICACIONES:

-Tela: Nylon


-Dimensiones: 122cm x 102cm

-Peso: 0,710kg

● COMO LIMPIAR:

Lavar a máquina y secar al aire. **NO** secar en secadora ni exponer al sol.

NO utilice suavizantes ni lejía.

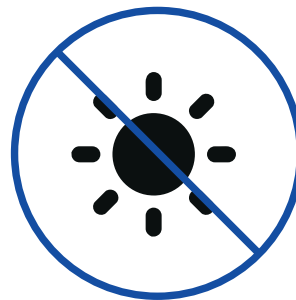


● INTRODUCCIÓN:

La almohadilla de posicionamiento con asas Eyra está especialmente diseñada para ayudar a levantar, trasladar, girar y reposicionar a los pacientes postrados en cama. Con el posicionamiento de la almohadilla de la cama, el cuidado de los pacientes será más fácil y se podrán evitar lesiones lumbares o de espalda innecesarias.

● NOTA:

1. Debe ayudar al paciente a acostarse en el medio de la almohadilla de posicionamiento con el hombro/escápula alineados con la cinta más alta para evitar que el cuerpo se doble al girar al paciente.

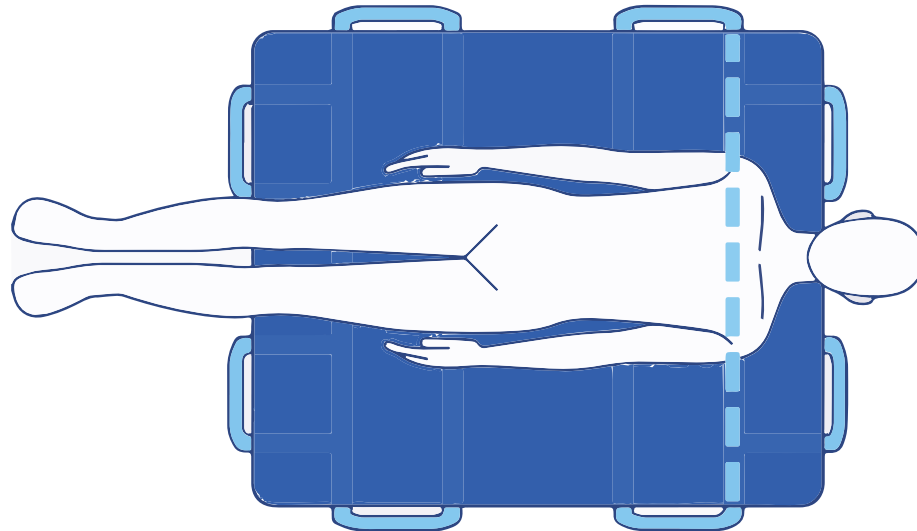


2. Al levantar la parte superior del cuerpo del paciente, hágalo con cuidado y lentamente, de lo contrario su cuello podría sentir molestias.

● CÓMO UTILIZAR:


Paso 1.

Ayude al paciente a acostarse de lado.

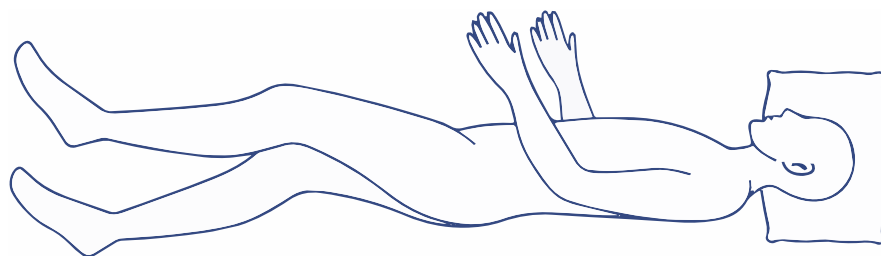



Paso 2.

Abra la almohadilla de posicionamiento, enróllela aproximadamente 2/3 y colóquela con cuidado debajo del paciente.

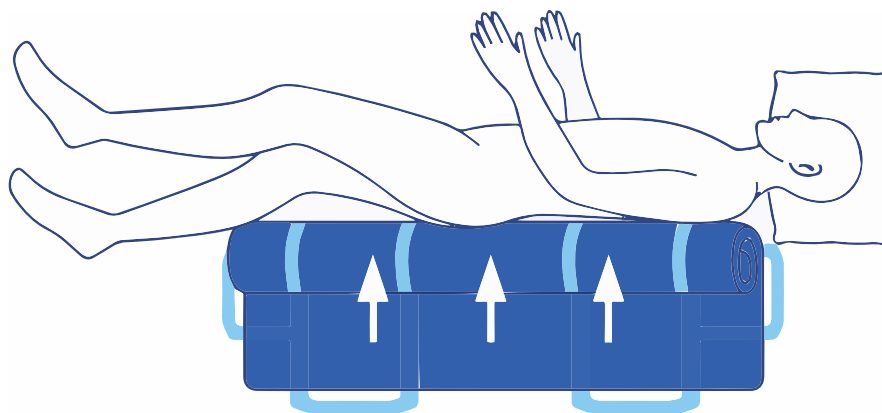


Paso 3.

Ayude al paciente a girarse y acostarse sobre el otro lado y saque lentamente la parte enrollada.

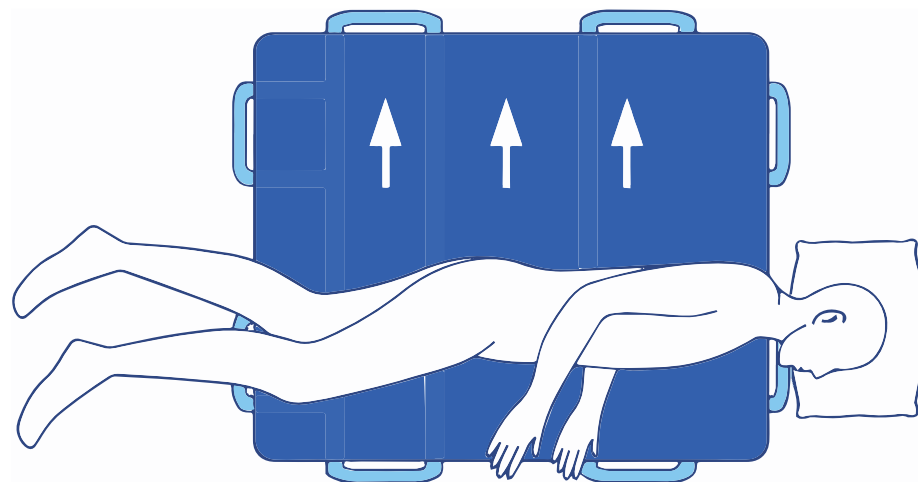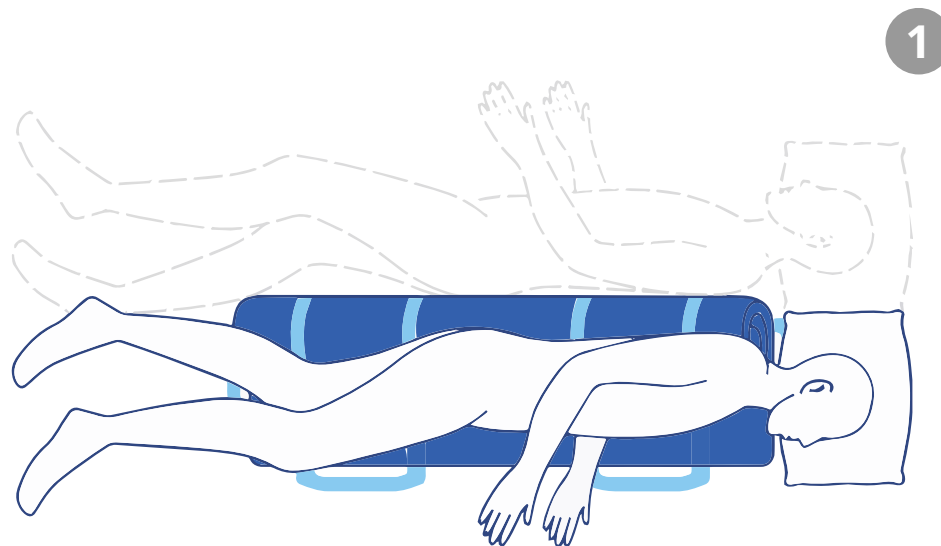

● MÉTODOS DE USO:

1. Para levantar al paciente por completo y reposicionarlo, se necesitan dos personas que trabajen juntas y levanten las manijas laterales.

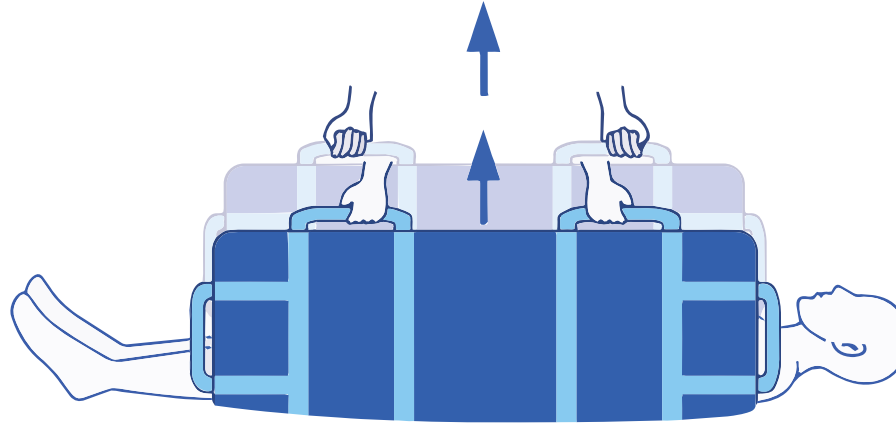

2. Para levantar la parte superior del cuerpo del paciente para mantener una posición sentada, levante las dos manijas superiores.



● PRECAUCIONES:

1. Este artículo no es 100% impermeable (el agua puede filtrarse a través de las costuras de la cincha). Si ocurre incontinencia urinaria, límpielo lo antes posible para evitar que se moje las sábanas. Si es necesario, coloque un pañal sobre la almohadilla de posicionamiento.

2. La almohadilla de posicionamiento es suave y debe usarse sobre una superficie de cama nivelada. Si va a elevar una cama ajustable, por razones de seguridad, recomendamos primero retirar la almohadilla de posicionamiento para evitar posibles deslizamientos.